

# ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਖਿਆ ਸੀਟ ਨੈਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ (NG) ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

"Use and Care of a Nasogastric (NG) Feeding Tube", Boston Children's Hospital, 9/20/2017, #169997 ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ।

## ਨੈਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ (NG) ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੈ?

NG ਟਿਊਬ ਇੱਕ ਨਰਮ, ਲਚਕੀਲੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵੱਚਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਲਿਊਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
- ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ Bridle® ਵਰਗੇ ਨੱਕ ਦੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਵਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਚਿੱਤਰ 4, ਪੰਨਾ 3 ਦੇਖੋ)।
- ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਚਿ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਜੇ NG ਟਿਊਬ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਵਿਵਾਈਸ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ NG ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਵਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

## ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:

ਜੇ NG ਟਿਊਬ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ (ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵੱਚਿ ਜਾਣਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਖੰਘ NG ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ NG ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NG ਟਿਊਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੇਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਵਿਵਾਈਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਵਿਵਾਈਸ ਅਤੇ NG ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ।

## NG ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:

- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਟਿਊਬ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵੱਚਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਚਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਟਿਊਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਖੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੱਚਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

## ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ:

- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
- ਜੇ NG ਟਿਊਬ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ **100.4°F (38°C)** ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਹੈ।



## ਚਿੱਤਰ 1

ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ NG ਟਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੱਕ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਟਿਊਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। NG ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਟੇਪ ਫ਼ਰੈਸੀਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

## ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NG ਟਿਊਬ:


- ਕਸਿਮ \_\_\_\_\_ Fr \_\_\_\_\_ ਲੰਬਾਈ \_\_\_\_\_
- ਨਾਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ \_\_\_\_\_ cm (ਸੈ.ਮੀ.)
- ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ \_\_\_\_\_

## ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਡਿੰਗਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਟਾਊਬ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NG ਟਾਊਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ NG ਟਾਊਬ \_\_\_\_\_ cm (ਸੈ.ਮੀ.) 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਸ਼ਿਅਨ ਨੱਕ 'ਤੇ ਹੈ। (ਚਿੱਤਰ 1, ਪੰਨਾ 1 ਦੇਖੋ)।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ cm (ਸੈ.ਮੀ.) ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਸ਼ਿਅਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਊਬ ਹੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- NG ਟਾਊਬ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੀਡਿੰਗ ਟਾਊਬ ਸਰਜਿਸ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ EnFit<sup>®</sup> ਸਰਜਿਸ) ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰਸ (ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵੱਚਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਂਗ) ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੋ। (ਚਿੱਤਰ 2, ਪੰਨਾ 2 ਦੇਖੋ)

## ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NG ਟਾਊਬ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

- ਵੱਡੀ ਸਰਜਿਸ (10-30 ਮਿ.ਲੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੋ ਜਾਂ ਟਾਊਬ ਨੂੰ 1-3 ਮਿ.ਲੀ. ਹਵਾ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ NG ਟਾਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਟਾਊਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

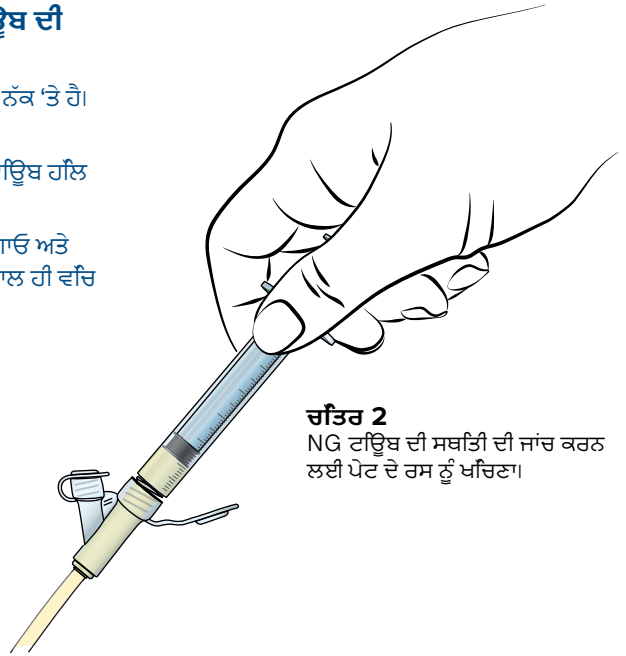

**ਚਿੱਤਰ 2**  
NG ਟਾਊਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ।

## ਫੀਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਅਤੇ ਵੈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

- ਫੀਡਿੰਗ ਬੈਗ ਜਾਂ ਸਰਜਿਸ ਨੂੰ NG ਟਾਊਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਪ ਜਾਂ ਗੁਰੂਤਾ (ਗਰੈਵਿਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਦਿਓ।
- ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ NG ਟਾਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ:


- ਜਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਤਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਚਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਲਓ।

**ਟਾਊਬ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ:** NG ਟਾਊਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚਿ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਚਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਫੀਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ NG ਟਾਊਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੱਚਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ।

**ਜੇ NG ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?** ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ/ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ NG ਟਾਊਬ ਵੱਚਿ ਪੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

- NG ਟਾਊਬ ਵੱਚਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਚਿ ਨਾ ਪੱਕੋ।
- NG ਟਾਊਬ ਵੱਚਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਾਈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ NG ਟਾਊਬ ਵੱਚਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। NG ਟਾਊਬ ਨੂੰ ਸਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

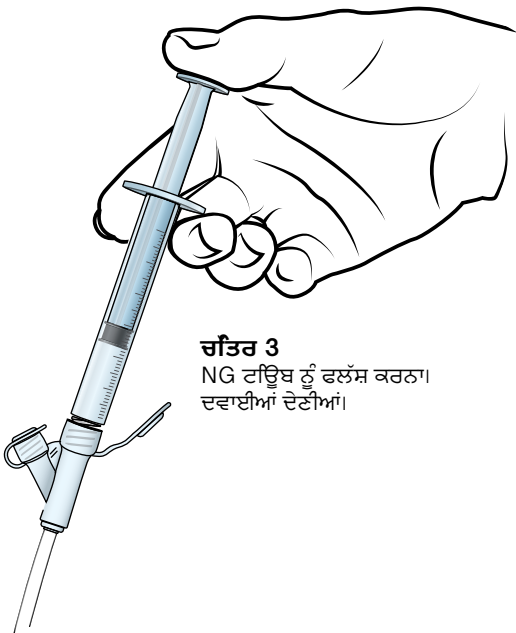

**ਚਿੱਤਰ 3**  
NG ਟਾਊਬ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ।  
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ।

## ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਹਿਰੇ ਅਤੇ NG ਟਊਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

- ਦਿਨ ਵੱਚਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਹਿਰੇ ਅਤੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਹਿਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਪ ਢਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ NG ਟਊਬ ਨਕਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੇਪ ਗਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।
- ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, NG ਟਊਬ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਟਊਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਵਾਈਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਟਊਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਵਾਈਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰਵਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ NG ਟਊਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਵਿ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।



### ਚਿੱਤਰ 4

NG ਟਊਬ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਟਊਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਵਾਈਸ ਲੱਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ।

## NG ਟਊਬ ਨੂੰ ਟੇਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ (ਚਿੱਤਰ 5, ਪੰਨਾ 3 ਦੇਖੋ):

- ਬੈਰੀਅਰ ਫਲਿਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Cavilon® No Sting Barrier) ਦੀ ਪਰਤ ਉਸ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ NG ਟਊਬ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ।
- ਬੈਰੀਅਰ ਫਲਿਮ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਇਡ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Duoderm®) ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾਓ।
- NG ਟਊਬ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ NG ਟਊਬ ਨੂੰ ਟੇਪ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tagaderm®) ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ।
- NG ਟਊਬ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਊਬ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕਰ ਦਿਓ।


### ਚਿੱਤਰ 5

NG ਟਊਬ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਇਡ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਪ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।



## ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਝਾਅ:

- NG ਟਊਬ ਨੂੰ ਚਪਿਚਪੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਰਿ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੱਚਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਟੁੱਬਰਸ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ NG ਟਊਬ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਚਣ।
- ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NG ਟਊਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟਊਬ ਖਿਚੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।

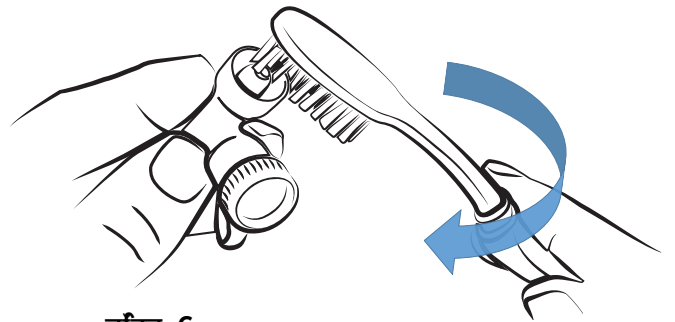

### ਚਿੱਤਰ 6

NG ਟਊਬ ਦੇ EnFit® ਸਰਿ ਦੀ ਟੁੱਬਰਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ।

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ: "Use and Care of a Nasogastric (NG) Feeding Tube", Boston Children's Hospital, 9/20/2017, #169997.