

ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਖਿਆ ਸੀਟ ਨਾਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ (NG) ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ: "Inserting a Nasogastric (NG) Feeding Tube", Boston Children's Hospital, 9/20/2017, #166533: ਵਿਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਖਿਆ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ (NG) ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NG ਟਿਊਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, UC Davis Children's Hospital ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਖਿਆ ਸੀਟ: ਨੈਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ (NG) ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NG ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕੀਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

- NG ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਜਾਂ ਜੇ ਟਿਊਬ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ NG ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NG ਟਿਊਬ:

- ਕਸਿਮ _____ Fr _____ ਲੰਬਾਈ _____
- ਨਾਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ _____ cm (ਸੈ.ਮੀ.)
- ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ _____

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸਿਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ:

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NG ਟਿਊਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਵਿ ਕਰਾਂ?

- NG ਟਿਊਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿਓ।
- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ:


- | | |
|--|---|
| - 5 ਮਿ.ਲੀ. ਅਤੇ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਸਰਜਿਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ EnFit® ਸਰਜਿਸ਼) | - ਟੇਪ |
| - NG ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ। | - ਹਾਈਡਰੋਕੋਲੋਇਡ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Duoderm®) |
| - ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਰਕਰ | - ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ, (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Tagaderm®) |
| - ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਪ | - ਕੋਚੀ |
| - ਬੈਰੀਅਰ ਫਲਿਮ ਸਟਿਕ/ਸਵੈਚ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Cavilon No Sting Barrier®) | - ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ KY Jelly®) |

ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ NG ਟਿਊਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

- ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- NG ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਜਾਂ ਚੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
- ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸ਼ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾਲ ਲਵੋ।
- ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ:

- ਬੈਰੀਅਰ ਫਲਿਮ ਸਟਿਕ/ਸਵੈਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
- ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕੋਲੋਇਡ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਹਿਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਵੇ।
- NG ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਪ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੋ।
- NG ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟੋ।

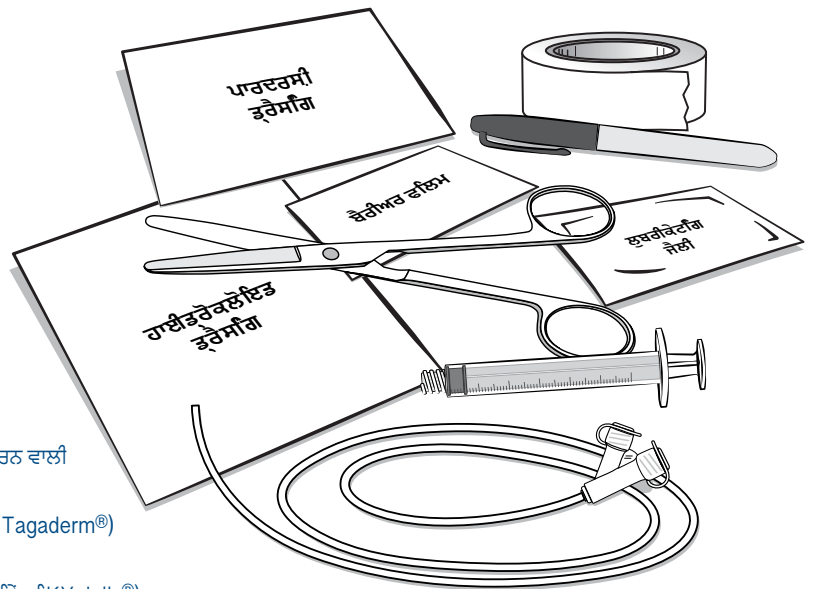

ਚਿੱਤਰ 1

NG ਟਿਊਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ।


NG ਟਰਿਊਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ:

- ਜੇ NG ਟਰਿਊਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖਸਿਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕੀਟਾਂ ਲਈ ਰੁਕੋ। ਫਰਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਨਾਸ ਵੱਚਿ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰਿਊਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਰਿਊਬ 'ਤੇ ਜੋਰ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਇਦ ਹੱਥੂ (ਗੈਗ) ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕੀਟਾਂ ਲਈ ਰੁਕੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਿਊਬ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪੈਸੀਫਾਇਰ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਟਰਿਊਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਘ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਟਰਿਊਬ ਮੂੰਹ ਵੱਚਿ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ NG ਟਰਿਊਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ।

NG ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੀਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

- ਜੇ NG ਵੱਚਿ ਸਟਾਈਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟਰਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ।
- NG ਟਰਿਊਬ ਦੇ ਸਰਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। (ਚਿੱਤਰ 2, ਪੰਨਾ 2)
- NG ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲੋਲ ਤੱਕ ਫੈਲਾਓ।
- ਫਰਿ, NG ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲੋਲ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹੱਸਿ (ਜਾਈਡੋਇਡ ਪ੍ਰਕਰਿਿਆ) ਅਤੇ ਪੁੰਨੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵੱਚਿਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈ। (ਚਿੱਤਰ 2, ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ ਤੀਰ)।
- ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਿਊਬ 'ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਿਊਬ ਦੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀਨਾ ਹੱਸਿ

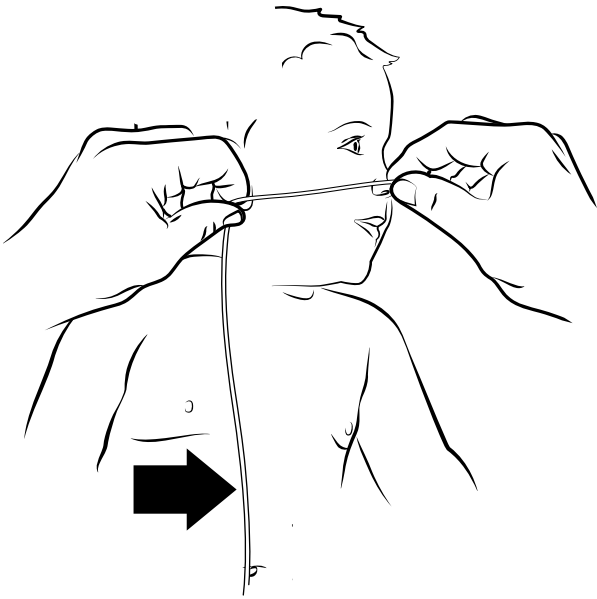

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਚਿ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ NG ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ:

- ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ NG ਟਰਿਊਬ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸਿ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਹੋ।
- ਜੇ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟਰਿਊਬ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੱਚਿ ਲਪੇਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵੱਚਿ ਨਾ ਲਾਇਾ ਸਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ NG ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਖਚਿ ਨਾ ਸਕੇ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓ। ਟਰਿਊਬ ਦੇ ਸਰਿ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਵੱਚਿ ਡੁਬੋਓ; ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਲਿਕਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਲਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪੱਛਿ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਾਸ ਵੱਚਿ ਪਾਓ।
- ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰਿਊਬ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- NG ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲੂਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਿਤ ਕਰ ਦਿਓ (UC Davis Children's Hospital ਦੀ 'ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹਿਾਇਆ ਸੀਟ: ਨੈਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ (NG) ਫੀਡਿੰਗ ਟਰਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ' ਦਾ ਪੰਨਾ 3 ਦੇਖੋ)।
- NG ਟਰਿਊਬ ਦੇ ਸਰਿ ਨਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਟਰਿਊਬ ਸਰਜਿ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰਿਊਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰਸ (ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ) ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੱਛਿ ਖਚਿ (UC Davis Children's Hospital ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹਿਾਇਆ ਸੀਟ: ਨੈਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ (NG) ਫੀਡਿੰਗ ਟਰਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ) ਦਾ ਚਿੱਤਰ 2 ਪੰਨਾ 2 ਦੇਖੋ)।



ਚਿੱਤਰ 3

ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਲਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪੱਛਿ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ NG ਟਰਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰੋ।