

# د کورنۍ د ښوونې او روزنې پاڼه

## د (Nasogastric (NG) د تغذیوي ټیوب کارول او پاملرنه

UC DAVIS  
HEALTH

CHILDREN'S  
HOSPITAL

«د (Nasogastric (NG) د تغذیوي ټیوب د کارولو او پاملرنې» څخه مطالب پکې شامل دي چې، د Boston د ماشومانو روغتون، ۲۰ سپټمبر ۲۰۱۷، #۱۶۹۹۹۷؛ له اجازې سره کارول شوي دي.

### Nasogastric (NG) ټیوب څه شی دی؟

- د NG ټیوب یو نرم او انعطاف منونکی ټیوب یا نل دی چې د پوزې له لارې داخلېږي او د مری له لارې معدې ته ځي.
- دا ستاسو ماشوم ته د درملو، مایعاتو، یا غذایی موادو د ورکولو لپاره کارول کېږي که چېرې دوی د خولې له لارې کافي اندازه مواد نه شي اخېستلی یا هم دا کار د دوی لپاره خوندي نه وي.
- دا ستاسو د ماشوم په غومبوري باندې د ربر ټپ یا د پزې د ټیوب د ساتلو وسیلې لکه Bridle\* سره په اړونده ځای کې نښلول کېږي. (۴م انځور، ۳مه پاڼه وگورئ).
- دا په میاشت کې یو ځل بدلیږي، یا که چېرې د NG ټیوب راولوېږي نو له دې ژر بدلیږي.
- که ستاسو ماشوم د پزې د ټیوب د ساتلو وسیله ولري، نو د NG د ټیوب او ساتلو وسیله به د ډاکټر یا نرس له لوري بدلولو ته اړتیا ولري.



2 انځور

د NG د ټیوب د ځای پرځای کولو لپاره د معدې د جوس ایستل.

### د خونديتوب اړوند یادونې:

- که چېرې د NG ټیوب په غلط ځای کې وي، نو تنفس (د خوړو یا معدې مواد سپرو ته داخلېدلی) شي. دا هغه مهال رامنځته کېږي کله چې کانګې (پورته راوځيږي) یا قوي ټوخی د NG ټیوب له معدې څخه را وباسي.
- که ستاسو ماشوم کانګې کوي نو، د NG له ټیوب څخه تر هغې کار مه اخلئ ترڅو چې تاسو اړونده ټیوب ځای پر ځای کړی نه وي.
- که تاسو د NG د ټیوب لیرې کولو ته اړتیا لرئ، ربر ټپ لیرې کړئ، او په نرمۍ او چټکۍ سره یې وباسئ.
- که ستاسو ماشوم د پزې د ټیوب د ساتلو وسیله ولري، تاسو کولی شئ اړونده تار پرې کړئ ترڅو وسیله او NG ټیوب یوځای لیرې کړئ.
- که ستاسو ماشوم لاندې موارد ولري، سمدلاسه د NG ټیوب وباسئ:
- ډېر ټوخی کوي، ټیوب یې له خپلې پوزې را ایستلی وي، یا یې ټیوب له خولې څخه راوځي.
- د خولې شاوخوا یې آبي رنگه کېږي.
- په سم ډول ساه نه شي اخېستلی.
- که ستاسو ماشوم د ټیوب له ایستلو وروسته هم ساه بنده لري یا په تنفس کې ستونزه لري، نو ۹۱۱ شمېرې ته زنگ ووهئ.

### ستاسو د ماشوم د NG ټیوب:

• ډول \_\_\_\_\_ اندازه \_\_\_\_\_ اوږدوالی \_\_\_\_\_

• د پوزې په سوري کې نښه \_\_\_\_\_ سانتي متره

• د ځای پر ځای کېدو نېټه \_\_\_\_\_

### د طبي مشورې غوښتنه وکړئ:

- که تاسو کومې پوښتنې یا اندېښنې لرئ.
- که چېرې د NG ټیوب ولوېږي او تاسو نه شئ کولی چې بدل یې کړئ.
- که ستاسو ماشوم  $F^{\circ} 100.4$  ( $C^{\circ} 38$ ) یا له دې لوړه تبه ولري.

UC DAVIS  
HEALTH

CHILDREN'S  
HOSPITAL

Children's  
Miracle Network  
Hospitals

## د ټولو تغذیه کولو، درملو، او تیوب له وینځلو مخکې د NG تیوب ځای په ځای کول وگورئ:

• ډاډ ترلاسه کړئ چې د NG تیوب په \_\_\_\_\_ سانتي متره کې دی یا تور رنگه نښه د پوزې په سوري کې ده.  
(۱ انځور، ۱ پاڼه وگورئ).

• که تاسو د سانتي مترو شمېره یا تور رنگه نښه نه شئ لیدلی، نو ښايي اړونده تیوب حرکت کړی وي او ښايي په سم ځای کې نه وي.

• د NG د تیوب په پای کې د تغذیه کولو د تیوب پیچکاري (د بېلگې په توګه د EnFit® سرنج) وصل کړئ او یو څه یې شاته کش کړئ ترڅو مصنوعي شیدي او/یا جزوي هضم شوي خواړه یا د معدې جوس په (روښانه یا کم ژېړ رنگ یا د وروستیو تغذیه کولو په څېر) وگورئ. (۲ انځور، ۲یمه پاڼه وگورئ)

## څه به وشي که چېرې د NG له تیوب څخه د معدې مواد نه شئ ترلاسه کولی؟

• یوه لویه پیچکاري یا سرنج (۱۰-۳۰ ملي لیټره) وکاروئ او تیوب بېرته راوباسئ یا د ۱-۳ ملي لیټره هوا سره یې وویځئ بیا هڅه وکړئ چې د معدې مواد بېرته راوباسئ.

• که بیا هم د معدې مواد نه شئ ترلاسه کولی، خپل ماشوم په چپ اړخ کېږدئ او ۱۰-۱۵ دقیقې انتظار وکړئ او بیا هڅه وکړئ.

• که چېرې د انتظار وروسته د معدې مواد ترلاسه نه کړئ، نو د NG تیوب مه کاروئ او د خپل ماشوم ډاکټر ته زنگ ووهئ. ستاسو ماشوم ښايي د تیوب د ځای د کتنې لپاره اېکسري ته اړتیا ولري.

## خواړه او درمل

د ځای پرځای کولو له کتنې وروسته، او کله چې تاسو خپل ماشوم ته د خوړو ورکولو لپاره چمتو یاست، نو د خپل نرس او پلورونکي ښوونکي له لوري درکړل شوي لارښوونې تعقیب کړئ:

• د تغذیې کڅوړه یا سرنج د NG له تیوب سره وصل کړئ او د پمپ یا جاذبې قوې له لارې له لارښوونې سره سم تغذیه ورکړئ.

• د خوړو د جریان په وخت کې خپل ماشوم یواځې مه پرېږدئ.

• که ستاسو ماشوم د خولې له لارې درمل نه شي اخېستلی، نو خپل د روغتیايي پاملرنې له کاري ډلې څخه د درملو لپاره د NG د تیوب د کارولو په اړه پوښتنه وکړئ:

• هرکله چې امکان ولري مایع درمل وکاروئ.

• گولی/تابلیټ ټوټې کړئ او په اوبو کې یې په ښه توګه حل کړئ.

• د تیوب وینځل یا پاکول: د NG تیوب باید په منظم ډول وویځل شي ترڅو له بندېدو یې مخنیوی وشي.

• د درملو له ورکولو مخکې او وروسته، د درملو ترمنځ، او د تغذیې مخکې او وروسته د NG تیوب د څښاک وړ اوبو سره وویځئ ترڅو یې د بندېدو مخه ونیول شي. تاسو ته به ستاسو د ماشوم د اړتیاوو پراساس څومره ویل کیږي یا که تاسو تیوب نه کاروئ نو په ورځ کې یو ځل په اوبو سره وینځل کیږي.

• څه به کیږي که چېرې د NG تیوب بند شي؟ په نرمۍ سره هڅه وکړئ چې د پیل/درولو حرکت په کارولو سره د څښاک گرمې اوبه د NG تیوب ته دننه کړئ.

• هېڅکله د NG د تیوب د خلاصولو لپاره د څښاک له اوبو پرته بل څه مه اچوئ.

• هېڅکله د NG د تیوب د خلاصولو لپاره د ستايلټ څخه کار مه اخلئ.

• که تاسو NG تیوب نه شئ خلاصولی، نو ښايي بدلولی ته اړتیا ولري. یواځې هغه مهال د NG تیوب بدل کړئ که چېرې تاسو ته در ښودل شوي وي چې دا کار باید څنګه وکړئ.



### 3 انځور

د NG د تیوب وینځل یا پاکول.  
درمل ورکول.



### 2 انځور

د NG د تیوب د ځای پرځای کولو  
لپاره د معدې د جوس ایستل.



4 انځور

د ماشوم د پوږي پاکول د NG تیوب او د پږي د تیوب د ساتلو له وسیلې سره.

### د خپل ماشوم مخ او د NG د تیوب شاوخوا څنگه پاکه کړئ:

- د خپل ماشوم مخ او پوزه پاکه وساتئ او لږترلږه په ورځ کې یو ځل د گرمو صابون اوبو سره دواړه خواوې په نرمۍ سره وویښئ. د خپل ماشوم مخ ډېر مه لنډوئ ځکه چې اړوند ربر ټپپ بڼایي خلاص شي، او د NG تیوب وغورځیږي. که چېرې اړوند ربر ټپپ لوند شي نو بدل یې کړئ.
- د پاکولو په وخت کې، د NG تیوب او د پږي د تیوب د ساتلو وسیلې شاوخوا پوستکي د خاریت یا انتاناتو د نښو لپاره وگورئ. که تاسو د خپل ماشوم د پوستکي په اړه کومه اندېښنه لرئ، د خپل ماشوم نرس یا ډاکټر ته زنگ ووهئ.
- ځینې ماشومان به د پږي د تیوب د ساتلو وسیله ولري، د هغو کسانو لپاره چې دا وسیله نه لري، کورنۍ به اړتیا ولري چې پوه شي چې څنگه د NG تیوب په خپل ځای کې وساتي.


### د ماشوم په غومبوري باندې له ربر ټپپ سره د NG تیوب نښلول (5 انځور، ۳مه پاڼه وگورئ):

- د خنډ طبقه (لکه Cavilon® No Sting Barrier) طبقه په هغه غومبوري باندې تطبیق کړئ چېرې چې به د NG تیوب وي. وچولو ته یې پرېږدئ.
- د هایدروکولایډ اړوند د پوستکي د خونديتوب پوښاک یوه کوچنۍ ټوټه تطبیق کړئ ترڅو پوستکي د خنډ له طبقې سره د خاریت (لکه Duoderm®) څخه خوندي کړي.
- د NG تیوب د پوستکي د خونديتوب له پوښاک سره ځای په ځای کړئ او د NG تیوب د ربر ټپپ یا شفاف پوښاک (لکه Tagaderm®) سره وپوښئ.
- د غوږ شاته د NG تیوب خوندي کړئ او تیوب یې په غاړه یا اوږه پورې وتړئ.



5 انځور

د NG تیوب د هایدروکولایډ اړوند د پوستکي د خونديتوب پوښاک او د ماشوم په غومبوري باندې په ربر ټپپ سره نښلول شوی دی.

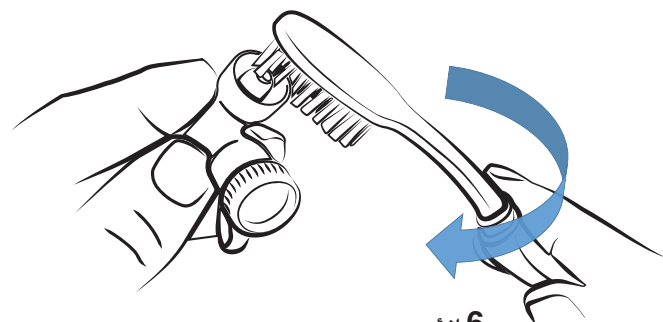

6 انځور

د NG تیوب د EnFit® پای د غاښونو په بورس سره پاکول.

### مهمې لارښوونې:

- د NG تیوب پای لږ تر لږه په ورځ کې یو ځل د غاښونو په پاک بورس او گرمو اوبو سره پاک کړئ ترڅو د سربښناک کېدو مخه یې ونیول شي.
- په کوچنیو ماشومانو پام کوئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې دوی د NG تیوب کش نه کړي.
- څاروي د خپل ماشوم د NG له تیوب څخه لیرې وساتئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې تیوب کش نه کړي.